

improving people's lives

JAY Xtreme Active



Jay Xtreme Active Kissen



- Jay Xtreme Active ist die **NEUE GENERATION** der bereits bestehenden Jay Xtreme & Jay Active Kissen
- Dekubitusschutz und moderate Positionierung in einem modularen System (Version Xtreme & Version Active)
- Sehr guter Hautschutz dank **bewährter wartungsfreier JAY Fluid Technologie**
- Leichtes Kissen mit tiefem Profil
- Innerer wasserabweisender Kissenbezug (Schutz der Basis)
- Äusserer Bezug: Mikroklima, Inkontinenz oder Stretch
- Eine Vielzahl an Sitzbreiten & Sitztiefen
- Positionierungselemente für die Beinführung
- Vereinfachter Bestellprozess



Therapeuten:

- Ein leichtes Kissen mit tiefem Profil, das sowohl Sitzstabilität als auch moderate bis hohe Dekubitusprophylaxe ermöglicht
- Benutzerfreundliches, einfach anpassbares Sitzkissen
- Mikroklimatischer Aussenbezug mit geringer Scherung sowie wasserabweisender Innenbezug (Schutz der Basis)

Händler:

- Bestens geeignet für ein breites Kundenspektrum an aktiven Nutzern
- Umfassendes Sortiment an Kissenbreiten und -tiefen
- Einfache und rasche Anpassungs- und Modifikationsmöglichkeiten



Nutzer:

- Leichtes Kissen mit tiefem Profil für aktive Nutzer
- Ein Kissen ohne komplexe Anforderungen an Handling und Unterhalt
- Einfach zu reinigendes, praktisches Anti-Dekubituskissen mit mikroklimatischem Aussenbezug und wasserabweisendem Innenbezug
- Positionierungs-Kit für die Beine – für einen verbesserten medialen und lateralen Support



1 Auf die Bedürfnisse von aktiven Nutzern zugeschnitten

- Tiefes Profil und leichtgewichtig
- Einfache Transfers

2 Modulares Anti-Dekubitus-Kissen mit moderater Positionierung

- Jay Fluid Auflage in zwei verschiedenen Grössen für unterschiedliche Bedürfnisse
- Positionierungs-Kit für die Beine optional erhältlich

3 Innovative Kissenbezugs-Technologie (duales System)

- Verbesserte Materialien und moderner Look
- Einfacher Unterhalt und Reinigung
- Alle Bezüge passen auf die Basen – keine Übergrößen mehr nötig!

4 Einfacher Bestellprozess

- Vereinfachung durch strukturiertes schrittweises Vorgehen
- Mehr oder weniger Fluid? Wähle aus Standard oder grossem Fluid Pad
- Limitierte Auswahlmöglichkeiten = Reduktion der Komplexität



UND: EINE WESENTLICH BREITERE AUSWAHL AN KISSENGRÖSSEN

1 Auf die Bedürfnisse von aktiven Nutzern zugeschnitten

- Basis aus Schaumstoff hoher Dichte garantiert Komfort & Stabilität
- Flache Basis ermöglicht dem Nutzer auch ein nach vorne Sitzen bei verschiedenen alltäglichen Aktivitäten und beim Transferieren in und aus dem Stuhl
- Tiefe Auflagefläche (Sitz-/Boden-Verhältnis)
 - Standard Fluid Pad: 5 cm (vorne)
 - Grosses Fluid Pad: 5 cm (vorne)
- Leichtgewichtig
 - Standard Fluid Pad: ab 1.4 kg (34x34 mit Mikroklimabezug)
 - Grosses Fluid Pad: ab 1.8 kg (34x34 mit Mikroklimabezug)





2 Modulares Anti-Dekubitus-Kissen mit
moderater Positionierung



Modularität




Standard Fluid Pad



Grosses Fluid Pad



Standard Basis für das Standard Fluid Pad

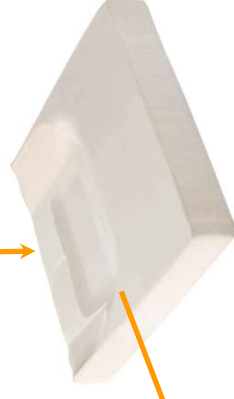

Modifizierte Basis für das grosse Fluid Pad



Positionierungs-Kit für die Beine - 3 Schaumstoff-Keile, die mittels Velcro am Innenbezug befestigt werden können (optional)



Innerer Bezug, geeignet für beide Basen und für beide Fluid-Füllungen



Äusserer Bezug (Mikroklima, Stretch oder Inkontinenz), geeignet für beide Fluid-Füllungen (auch für optionales Positionierungs-Kit)



Jay Fluid Pad – maximiert den Dekubituschutz und minimiert Scherkräfte bei aktiven Nutzern

Xtreme Active mit Standard Fluid Pad

NUTZERPROFIL: Aktive Kunden, die ein leichtgewichtiges Kissen mit tiefem Profil benötigen. Das Kissen ermöglicht einen guten Dekubituschutz und eine moderate Sitzstabilität.




Xtreme Active mit grossem Fluid Pad

NUTZERPROFIL: Aktive Kunden, die einen guten Dekubituschutz und Scherkraftreduktion wünschen. Kunden, die eine grössere Fluidfüllung unter den knöchernen Gesässbereichen benötigen, jedoch nicht auf ein schwereres & höheres Anti-Dekubituskissen umsteigen möchten.



Positionierungs-Kit für die Beine

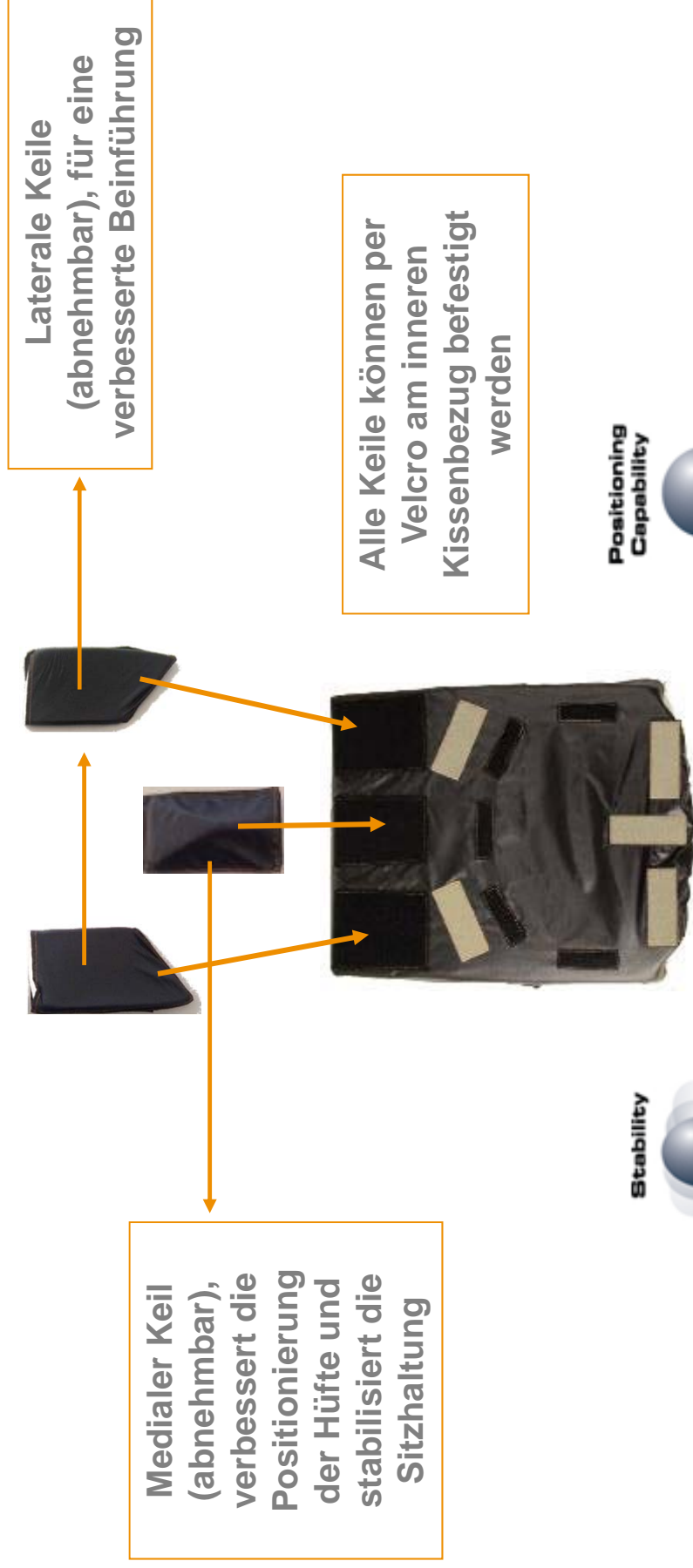


**Medialer Keil
(abnehmbar),
verbessert die
Positionierung
der Hüfte und
stabilisiert die
Sitzhaltung**

**Laterale Keile
(abnehmbar), für eine
verbesserte Beinführung**

**Alle Keile können per
Velcro am inneren
Kissenbezug befestigt
werden**



3 Innovative Kissenbezugs-Technologie

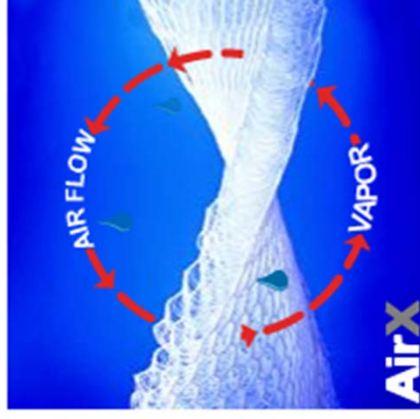

Innerer Kissenbezug



- Wasserabweisend und einfach zu reinigen
- Aquaguard Reißverschluss mit speziellem Feuchtigkeitsschutz
- **Ein** innerer Kissenbezug für alle Kissenversionen:
 - Grosses Fluid Pad (Befestigung mittels grauer Velcro-Streifen) oder
 - Standard Fluid Pad (Befestigung mittels schwarzer Velcro-Streifen)
 - Positionierungs-Kit für die Beine über Velcro-Befestigung



Äusserer Kissenbezug



- Hochwertige Verarbeitung und verbesserte Materialien (analog Jay Balance Kissen)
- 3DX Gewebe (Abstandsgewirke) hilft Wärme und Feuchtigkeit vom Körper weg zu transportieren
- Abgeschrägte Vorderkante (Verhindert Reibungen im Beinbereich)
- Waschbar bei 60° C und schnell trocknend
- Integrierte Utensilentasche für die kleinen Dinge des Alltags




Äusserer Kissenbezug


Das Xtreme Active Kissen kann in 3 verschiedenen äusseren Kissenbezugs-Versionen bestellt werden:

- Mikroklima – hilft Wärme und Feuchtigkeit vom Körper weg zu transportieren und hält die Oberfläche sauber und trocken
- Stretch – ermöglicht ein verbessertes Einsinken ins Material und verhindert damit zusätzlichen Druck durch Oberflächenspannung
- Inkontinenz – hilft die Basis vor Feuchtigkeit & Nässe zu schützen und ermöglicht damit einen längeren Kisseinsatz

Alle 3 äusseren Kissenbezüge können auch mit einem Positionierungs-Kit für die Beine verwendet werden – ohne zusätzlich Oberflächenspannung zu generieren.

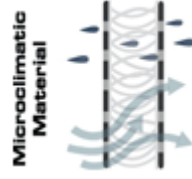

Einfacher Bestellprozess

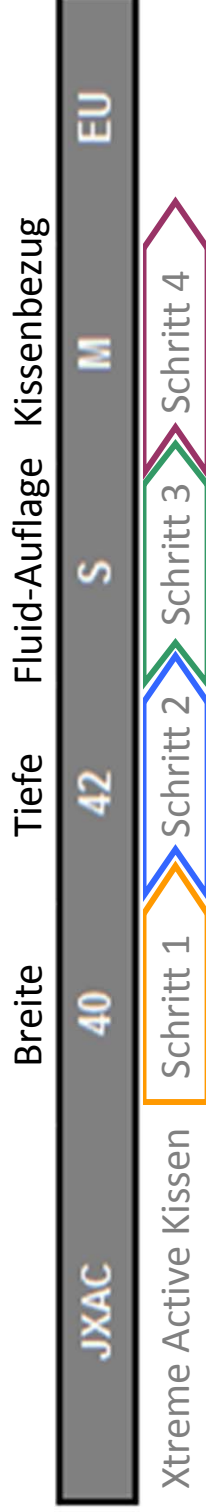

Bestellung in 4 SCHRITTEN:

Schritt 1

Kissenbreite, z.B. 40 cm

Schritt 2

Kissentiefe, z.B. 42 cm

Schritt 3

Fluid Füllung

S = Standard Fluid Pad / L = Grosses Fluid Pad

Schritt 4

Äusserer Kissenbezug

M = Mikroklima / S = Stretch / I = Inkontinenz



Einfacher Bestellprozess



Auch wenn die Basis für die beiden Fluid Pad S oder L unterschiedlich ist, muss diese nicht separat in einem zusätzlichen Schritt bestellt werden. **Die richtige Basis wird automatisch aufgrund Ihrer Auswahl der Fluid Auflage (S oder L) mitgeliefert.**


Falls ein Positionierungs-Kit für die Beine benötigt wird, wählen Sie dieses einfach auf Seite 2 des Bestellformulars aus.

POSITIONIERUNG

(Optionaler Schritt - nur auswählen, wenn eine Positionierung gewünscht wird)

POSITIONIERUNGS-KIT FÜR DIE BEINE (vgl. Matrix auf S. 1)

- LSKIXACEU-S Positionierungs-Kit (klein) bis ST 42 cm
 - LSKIXACEU-R Positionierungs-Kit (Std) für ST 44 - 50 cm
- Jeweils bestehend aus 2 lateralen & 1 medialen Keil für die Beinführung; Höhe jeweils 2.5 cm

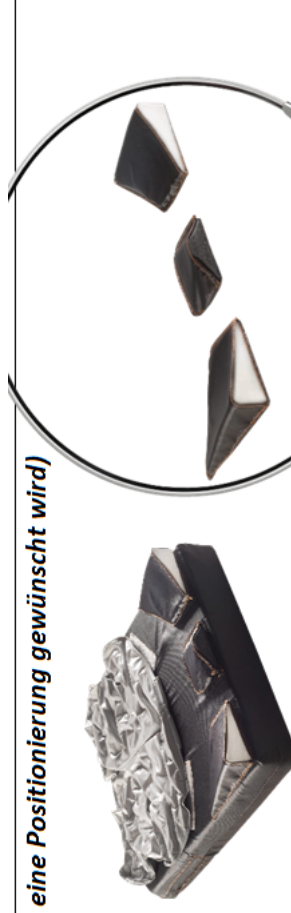

Innere & äussere Kissenbezüge können sowohl **mit** als auch **ohne Positionierungs-Kit** verwendet werden. Bei Verwendung des Positionierungs-Kits ist es daher nicht nötig, einen zusätzlichen Kissenbezug zu bestellen.



Technische Daten



- Gewicht ab 1.4 kg
- Kissenbreite 34 – 50 cm
- Kissentiefe 34 – 50 cm
- Kissenhöhe 5 cm (vorne)
- Auflagen (Beckenbereich) Jay Flow Fluid, Grösse S oder L
- Äusserer Bezug Mikroklima, Stretch oder Inkontinenz
- Innerer Bezug Stretchbares Lycra, wasserabweisend und einfach zu reinigen
- Positionierungs-Kit optional mit 3 Positionierungselementen
- Max. Benutzergewicht 150 kg



Zusammenfassung



- Jay Xtreme Active – ein leichtes Kissen mit tiefem Profil, spezifisch für Personen mit aktivem Lebensstil entwickelt
- Dekubituschutz & Sitzstabilität sowie einfache Handhabung im Alltag
- Neuste Kissentechologie, moderner & ästhetischer Look
- Duales Kissenbezugs-System – äusserer & innerer Kissenbezug
- Positionierungs-Kit für die Beine optional erhältlich
- Reduktion der Kissen- und Portfolio-Komplexität:
 - Einfach verschreib- und bestellbares Kissen
 - 2 verschiedene Nutzerprofile werden über ein Kissen angesprochen (Xtreme Active)
- 44 verschiedene Grössen





JAY Xtreme Active



*Hautschutz & Sitzstabilität für den
aktiven Nutzer*

